

PRØV IRIS
MED DEN **NYE** LET
BEVÆGLIGE **ARM**



IRIS

TASTATUR



- **LED** TEKNOLOGI
- 8.000- **50.000 LUX**
- **SKYGGEFRIT LYS**

- **FARVETEMPERATUR** JUSTERING



FARVE MATCHING



KIRURGI



COMPO SAFE

FARVETEMPERATUR

VÆLG

DEN **RIGTIGE FARVETEMPERATUR** FOR HVER BEHANDLING.



INGEN LYS
POLYMERISATION VED
ARBEJDE MED COMPOSITE



SE DET RØDE VÆV OG
DET HVIDE BEDØVEDE
OMRÅDE KLART



ALTID NATURLIGT
DAGSLYS FOR AT FINDE
DEN RIGTIGE FACADE
FARVE

SKYGGEFRI LYS



Perfekt afgrænset
lysfelt



8 LED OPTIK LYS MED 10 FACETTE VINKLER PÅ HVER,
SOM REFLEKTERER DET BEDSTE **SKYGGEFRIE LYS**

TILBEHØR



- **SPEJL KIT**

FORBEDRER KOMMUNIKATION
MED PATIENTEN



- **BLEGNINGS LYS
"CORE WHITE"**

KONTAMINERINGS KONTROL



* LET RENGØRBAR FRONTLÅG
FORHINDRER

KRYDSKONTAMINERING

* AFTAGLIG AUTOKLAVERBAR
HÅNDTAGSDÆKSLER - PLASTIK
PROGRAM 121° (2 par pr. lampe)

*OPTIK ER BESKYTTET MOD STØV OG
BEHØVER IKKE RENGØRES




NY ARM

- MODERNE DESIGN
- ØGET BEVÆGELSE
- 100% ALUMINUM

FLOW BEVÆGELSE



OPTIMERET BEVÆGELSE
GENNEM ET UDVIKLET
MEKANISK SYSTEM

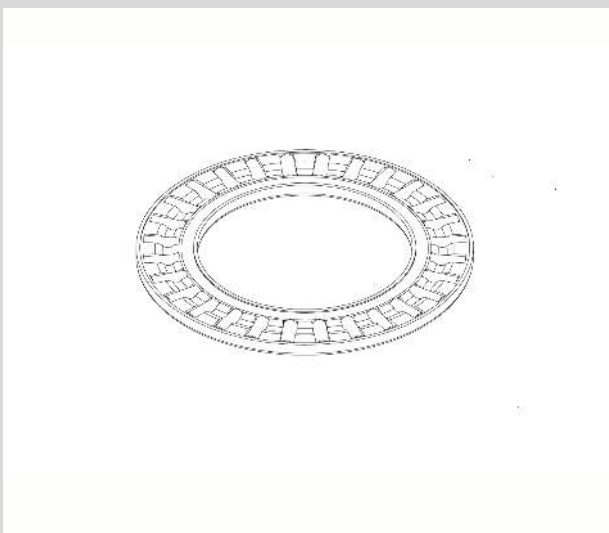

ØGET
ROTATIONSSYSTEM MELLEM
LED OG MOBIL ARM VED
HJÆLP AF RULLELEJER

NEM AT INSTALLERE & JUSTERE

- LET JUSTERBAR **FJEDERARM**
- JUSTERING AF **CENTRAL LEDFRIKTION**
- 2 LEDFRIKTION JUSTERING
- 3 LEDFRIKTION JUSTERING
- **NEMT AT SKIFTE** FRA TAG MONTERING TIL UNIT MONTERING
- FORSKELLIGE **MONTERINGS MULIGHEDER**: UNIT, LOFT, VÆG, VOGN, OG KIRURGISK VOGN
- **EGNET TIL FORSKELLIGE UNITS**, TAKKET VÆRE EN BRED VIFTE AF LAMPE TAPPE TIL LAMPERØRET



ALSIDIGHED

- MEKANISK



DREJES MED FLERE
MÅL OG KAN
TILPASSES ADAPTERE

- ELEKTRISK



VARIABEL SPÆNDING
FRA 12-24V

- FARVE



LAMPEN KAN
LEVERES I ALLE
ØNSKEDE RAL
FARVER


LET VEDLIGEHOJDELSE

LETTERE **VEDLIGEHOJDELSE** MED
ET STANDARD **RESERVEDELS KIT**.

- HÅNDTAG
- FRONTDEKSEL
- ELEKTRONIK



ARM MÅL OG TILPASNINGER

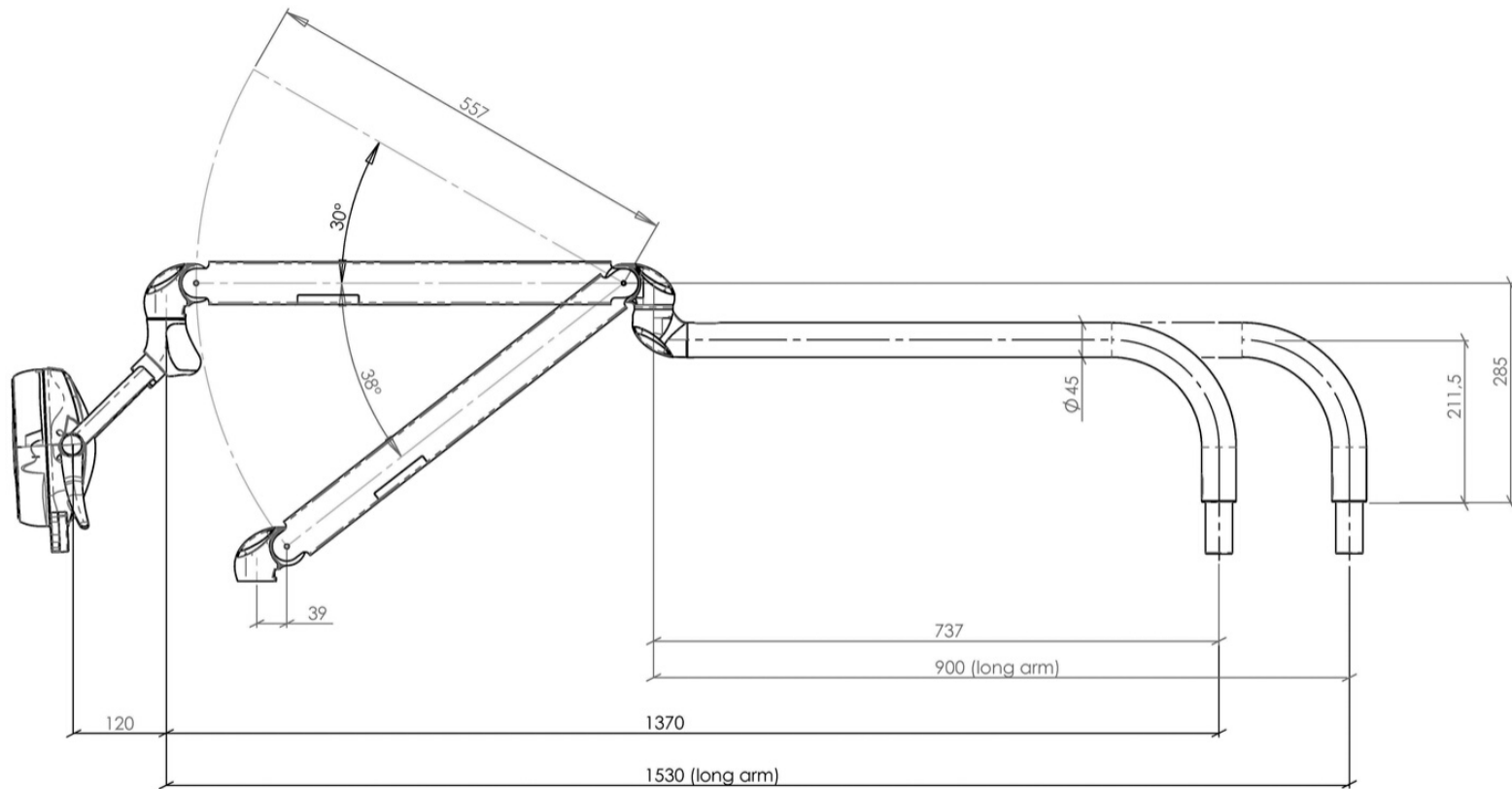


PASSER TIL :

ADEC
BELMONT
CEMM
EURODENT (NEW)
FONA
GALBIATI

HEKA (FARO MOD)
KAVO (SOME MODELS)
MIGLIONICO
NEW IDEM
OMS
OSSTEM

SWIDENT
VITALI
ANTHOS
CASTELLINI
STERN WEBER

ARM - H90 fast arm

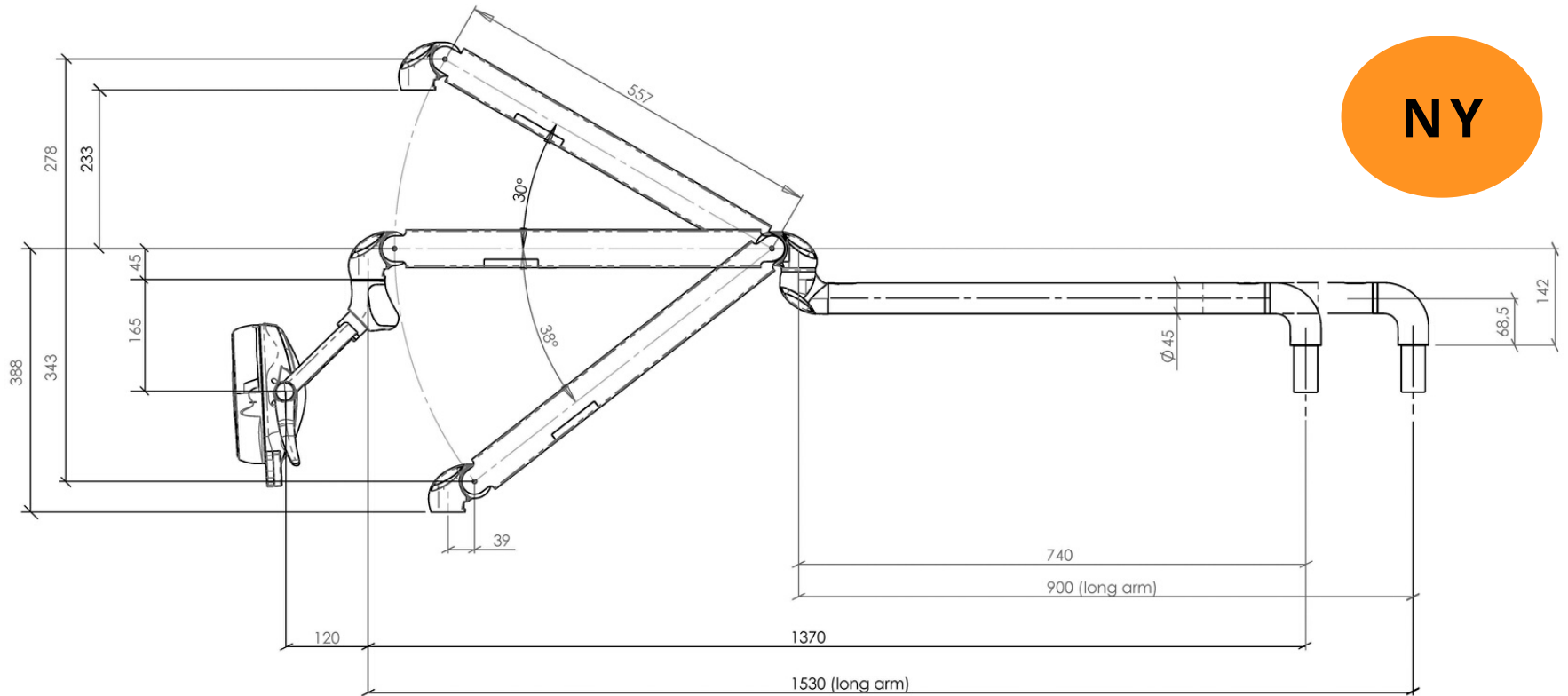

PASSER TIL :

EURODENT (OLD MODEL)


FIMET

KAVO (SOME MODELS)

PLANMEKA (include transformator)

SIRONA

ARM MÅL - HEKA

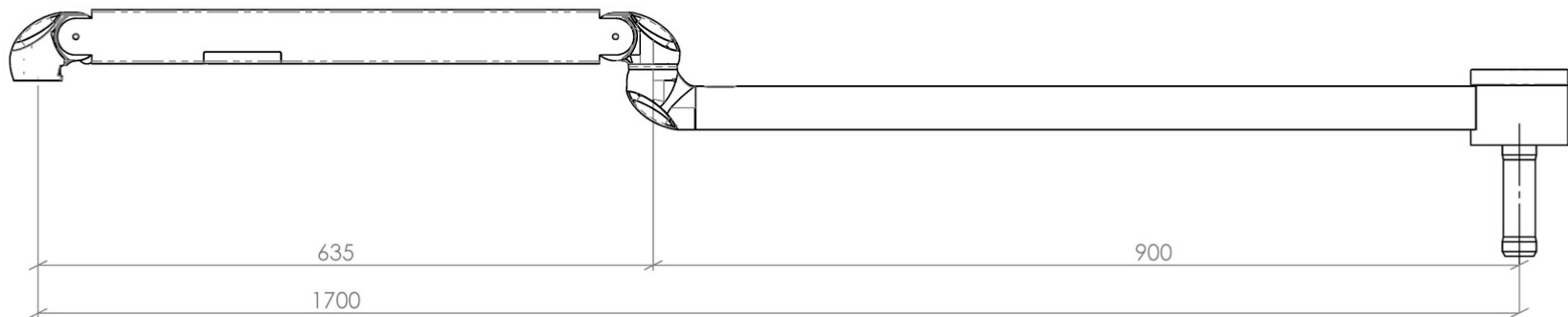


FAST ARM VIL BLIVE PRODUCERET TIL AT PASSE :

HEKA UNIC


HEKA UNICLIINE S

ANBEFALEDE AFSTAND

LOFT MONTERING

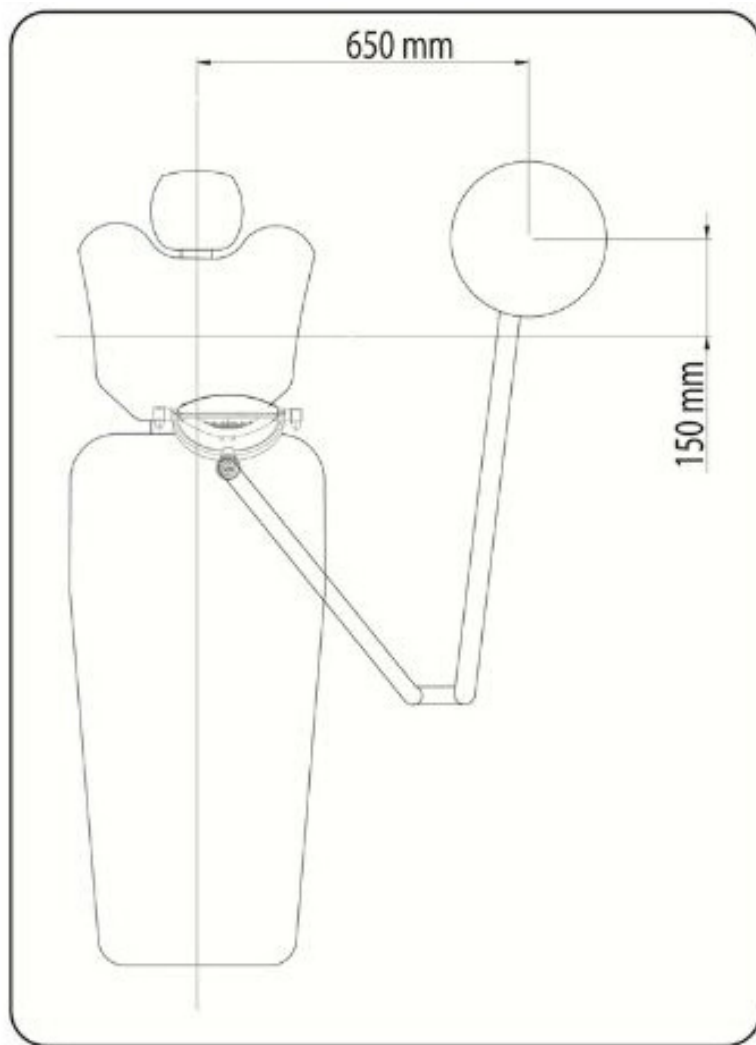

VÆG MONTERING

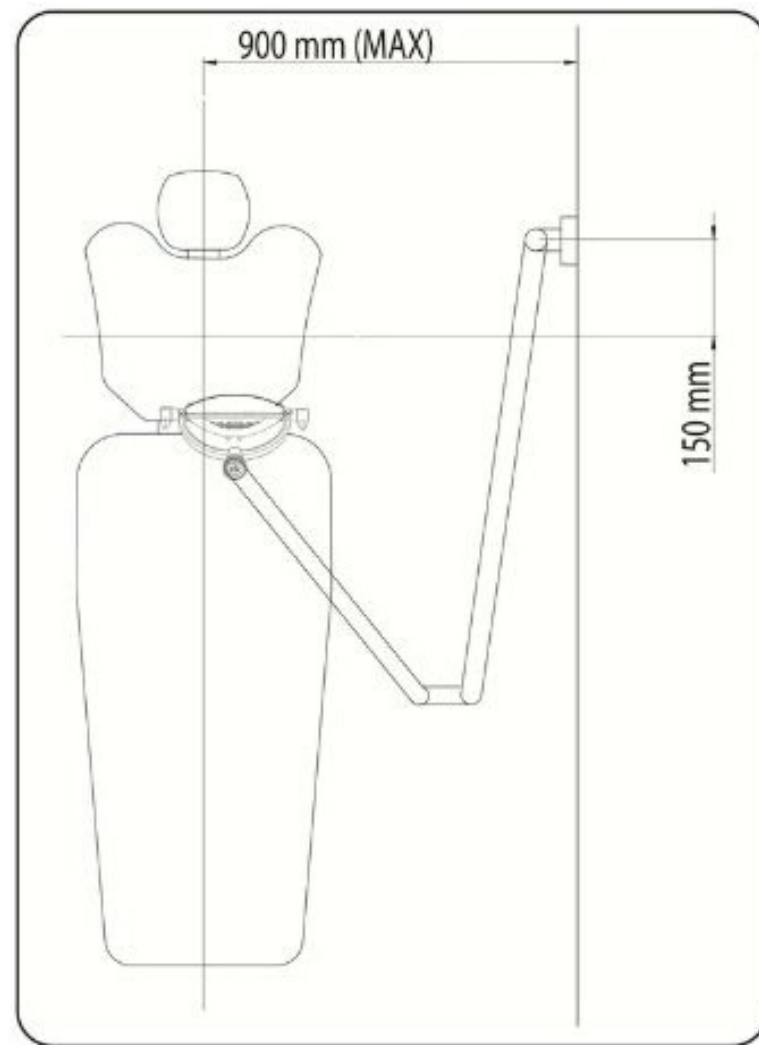

TEKNISKE FUNKTIONER

IRIS

- FORSYNINGSSPÆNDING: 12 - 24 VAC 50-60 HZ
- MAXIMAL STROMFORBRUG: 50 VA
- LYSFELT : 80 X 200 MM
- LYSINTENSITET (5 TRIN): FRA 8.000 TO 50.000 LUX
- FARVETEMPERATUR (5 TRIN): FRA 4200 K TO 6000 K
- ARBEJDSAFSTAND: 70 CM
- LYSKILDE: 8 LEDS
- 2 ÅRS GARANTI

CORE WHITE

BLEGNINGS LYS

- VÆGT: 800 G
- STRØMFORSYNING: 17-24 VAC
- MAKSIMALT STRØMFØRBRUG: 30 VA
- STRØMFORBRUG: 1.5 A
- LYSFELT: 80X20 MM
- LYSKILDE: 4 LED (3.5 W CAD.)
- EMISSIONS SPECTRUM: 420-480 NM
- MAXIMAL LYSSTYRKE: 2000MW
- MAXIMUM AFSTAND FRA PATIENT: 10 CM

STANDARD

CERTIFICATES

INTERNATIONAL STANDARD

**ISO
9680**

Third edition
2014-10-15

Dentistry — Operating lights

Médecine bucco-dentaire — Appareils d'éclairage

LYS SOM GARANTERER OPTIMAL
VISUEL COMFORT,
FARVEOPFATTELSE OG
FORHINDERER ØJENBELASTNING

www.gcomm-online.com



ISO 13485: 2016 CERTIFICATE

LAMPADA DENTALE LED POLARIS

ITALIANO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il fabbricante G.COMM,
Via Douzetti, 22
20872 Cornate D'Adda (MB)
Italia

DICHIARA

sotto propria ed esclusiva responsabilità che la lampada dentale

Modello: POLARIS

è conforme ai requisiti del D.Lgs. 46 del 24/02/97, in attuazione della Direttiva europea 93/42/CEE, emendato col D.Lgs. 37 del 25/01/2010 - recepimento Direttiva 2007/47/CE per i dispositivi medici di Classe I.

Questo prodotto è fabbricato in conformità alle norme:

- EN 60601-1:1990 "Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Norme generali per la sicurezza" + A1:1993 + A2:1995
- EN 60601-1-2:2001 "Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Norme generali per la sicurezza 2. Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica - prescrizione e prove" + A1:2006
- EN ISO 14971:2007 "Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici"
- UNI EN ISO 9680:1996 "Lampada dentale"

La G.COMM rende noto che la presente dichiarazione di conformità decade nel caso in cui:

1. le manutenzioni/controlli non vengano effettuati secondo le modalità previste dalla G.COMM nel Manuale del Prodotto e da personale da G.COMM autorizzato;
2. uno o più componenti del prodotto vengano sostituiti con componenti non espressamente autorizzati dalla G.COMM;
3. il prodotto sia oggetto di manomissioni non espressamente autorizzate dalla G.COMM incluso collegamento ad altro prodotto non autorizzato da G.COMM.

La responsabilità per danno da prodotti difettosi (DPR 22/4/1988 + Dir. 85/374/CEE) si estingue dopo 10 anni dalla data in cui il fabbricante ha messo in circolazione il prodotto e ricade sull'utilizzatore.

Giuffreda Nicola
Amministratore Unico

Giuffreda Nicola

ØVERENSTEMMELSE
ERKLÆRING